

4. Jemná péče a důležité informace

1) Čištění a skladování

- Sonda je voděvzdorná, je možné ji vložit přímo do alkoholu (lihu) k vyčištění nebo utřít ji alkoholem napuštěnou látkou. Z hlavní jednotky setřete špinu suchou látkou, nikdy nevkládáte tělo jednotky do žádné tekutiny.
- Neskladujte jednotku v prostředí s nevhodnou teplotou ani v autě, kde je vystavena přímému slunečnímu záření.
- Chraňte teploměr před upadnutím. Nedotýkejte se prsty čočky sondy. Nepokoušejte se jednotku rozložit, s výjimkou výměny baterie.


2) Poznámky k měření

- Čistěte špičku sondy před a po každém použití. Vyhněte se akumulaci potu ovlivňující infračervené měření.
- Neměřte teplotu během 30 minut po jídle, cvičení nebo koupeli.
- Je lepší počkat nejméně 1 minutu mezi po sobě jdoucími měřeními. Pokud uživatel nepřetržitě měří teplotu v krátkém čase, vyskytují se běžné chyby v měření.
- Pokud po zapnutí jednotky nebo během provozu jednotka zobrazuje nečitelný kód (symboly), prosíme, vyjměte baterii a znovu ji vložte zpět. Poté zapněte přístroj k pokračování v měření.

Digitální ušní teploměr Návod k použití

1. Technika použití


1) Schéma produktu

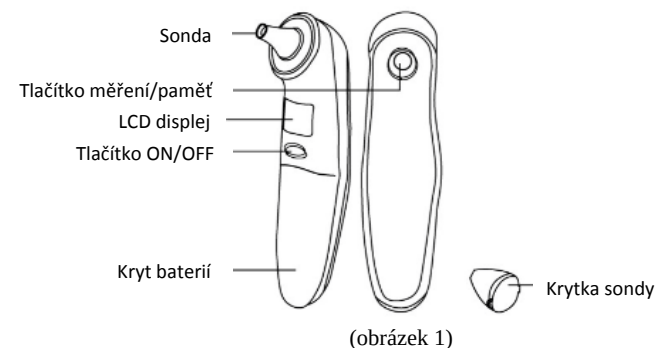

2) Zapínání a vypínání

Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) na teploměru, na displeji se krátce zobrazí všechny ikony (viz obrázek 2). Poté se na displeji na 2 sekundy objeví značka „---“, teploměr krátce zapípá a zabliká „C“ nebo „F“, což indikuje, že jednotka je připravená na měření. (viz obrázek 2)

Teploměr se automaticky vypne přibližně po 2 minutách bez činnosti. Uživatel jej také může vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF.

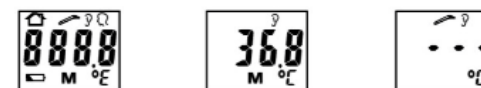

3) Převzetí čtení

Sejměte krytek, šetrně vložte sondu do ucha tak daleko, jak to dovolí ušní bubínek a stiskněte tlačítko „MEASURE“ (měření/paměť). Po jedné sekundě jednotka zapípá, což indikuje, že měření je dokončeno.

Když teplota dosahuje nebo přesahuje 37,5°C, teploměr znovu plynule zapípá.

Pro zopakování měření, vyčkejte, než se objeví značka .

R224

4) Změna měření ve stupních Celsia/Fahrenheita

Stiskněte a podržte přibližně 4 sekundy tlačítko „MEASURE“, na displeji zabliká „C“ nebo „F“, tlačítko pusťte. Pak stiskněte tlačítko „MEASURE“ znovu pro přepnutí °C nebo °F. Jednotka automaticky cca 5 sekund po přepnutí vstoupí do vybraného režimu.

Poznámka: Stiskněte a držte tlačítko „MEASURE“, když na displeji zabliká „C“ nebo „F“, uživatel by měl automaticky tlačítko pustit. Pokud se na displeji zobrazují další symboly, vypněte přístroj a poté proces zkuste znovu zopakovat.

5) Znovunačtení naměřených záznamů v paměti přístroje

1. Stiskněte tlačítko „MEASURE“, když je jednotka vypnutá, na displeji se zobrazí a rozbliká symbol „---M“.
2. Stiskněte tlačítko „MEASURE“ znovu, na displeji se zobrazí první záznam teploty a zároveň se rozbliká symbol „---M“. Stále držte tlačítko „MEASURE“ k prohlédnutí si dalších předchozích uložených záznamů. Posledních 12 záznamů se automaticky ukládá do paměti přístroje.
3. Pokud není v paměti uložen žádný záznam, na displeji se zobrazí „---“, „C“, „---M“ a zároveň bude blikat „---M“.

Poznámka: Ke znovunačtení měření, jednotka musí být nejdříve vypnuta, poté stiskněte tlačítko „MEASURE“ k prohlédnutí těchto záznamů v paměti.

6) Upozornění na vybitou baterii

Když se na displeji objeví symbol upozornění na vybitou baterii, baterie potřebuje nahradit. V opačném případě bude teploměr pracovat s velkými chybami v měření. Když je energie baterie pod minimální hodnotou, na displeji budou ikony zobrazeny slabě. Baterie musí být nahrazena předtím, než teploměr bude znovu použit. (obrázek 3)




(obrázek 3)

R224

7) Mimo rozsah měření

1. Pokud je zaznamenaná teplota nad 42°C nebo 107,6 °F, zobrazí se symbol „H“ a symbol „C“ ani „F“ nebude blikat. (obrázek 4)
2. Pokud je zaznamenaná teplota nižší než 34°C nebo 93,2°F, zobrazí se symbol „L“ a symbol „C“ ani „F“ rovněž nebude blikat. (obrázek 4)
3. Pokud je teplota v operačním prostředí přístroje vyšší než 40,0°C nebo 104°F, zobrazí se symboly „H“ a „, symboly „C“ ani „F“ nebudou blikat. (obrázek 5)
4. Pokud je teplota v operačním prostředí přístroje nižší než 10,0°C nebo 50°F, zobrazí se symboly „H“ a „, symboly „C“ ani „F“ nebudou blikat. (obrázek 5)

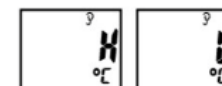

(obrázek 4)



(obrázek 5)

2. Manipulace, skladování a transport

- 1) Provozní teplota: 10 - 40°C
- 2) Rozsah měření: 34 - 42°C
- 3) Teplota pro skladování a transport: -20°C-60°C · <85% RH
- 4) Pouze pro použití ve vnitřních prostorách

3. Specifikace a životnost baterií

- Baterie: 2x AAA baterie
- Instalace: Sejměte kryt baterií, vložte novou baterii podle polarity (viz symboly + a – na jednotce)
- Pokud nehodláte používat teploměr po dobu 15 dní nebo déle, vyjměte baterii.
- Baterii lze použít na více než 5 000 měření a může vydržet i déle než 1 rok.